

## コロナワクチン接種用シリンジについて

対象製品：HJJ4010-LT LT オール P シリンジ 1ML 滅菌済  
メーカー：Henke-Sass, Wolf GmbH (HENKE-JECT®)

シリンジの緑色のプランジャー(ピストン部)の表面に黒い点などが見られる場合があります。  
(表面を擦っても取れない黒色(茶色のような色の時もあります)の斑点のようなもの)  
※異物が動く場合は黒点ではないので、念の為使用は差し控えて下さい。


これはプラスチック製品の射出成形の際に樹脂材料が高熱によって炭化したものになります。  
この黒点(樹脂焼け)は外観不良の一つで、製品の安全性には問題はありませんので、そのまま使用して頂いても問題ありません。  
ただ薬液が触れる部分に同様の黒点がある場合は念の為、使用せず廃棄して下さい。

2021年5月  
大阪ケミカル株式会社 水谷

## HJJ4010-LT LT オール P シリンジ 1ML 滅菌済




プランジャー（ピストン部）を引き抜いた状態

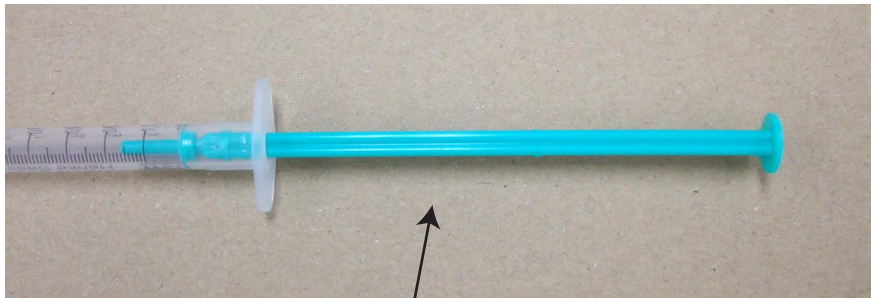

この緑色のプランジャー部に黒い点などが見られる場合があります。  
(表面を擦っても取れない黒色(茶色のような色の時もあります)の斑点のようなもの)  
※異物が動く場合は黒点ではないので、念の為使用は差し控えて下さい。

これはプラスチック製品の射出成形の際に樹脂材料が高熱によって炭化したものになります。この黒点(樹脂焼け)は外観不良の一つで、製品の安全性には問題はありませんので、そのまま使用して頂いても問題ありません。  
ただ下図のように薬液が触れる部分に同様の黒点がある場合は使用せず廃棄して下さい。

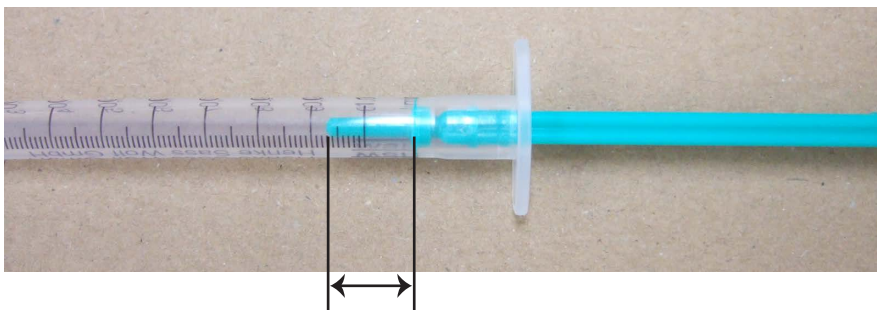

※薬液に触れるこの部分に黒点があるものについては  
念の為、使用せず廃棄して下さい。