

## コロナワクチン接種用シリンジについて

対象製品：HJJ4010-LT LT オール P シリンジ 1ML 滅菌済  
メーカー：Henke-Sass, Wolf GmbH (HENKE-JECT®)


シリンジの外筒(バレル)部に茶色や黒い焦げのような汚れが見られる事があります。これはプラスチック製品の射出成形時に金型内の空気や樹脂から発生するガスが圧縮されて高温化し、成形品が焦げ付く現象です。

この樹脂焼けは外観不良の一つで、製品の安全性には問題はありませんが、そういった製品を確認した場合は、念の為使用せずに廃棄して下さい。

2021年6月  
大阪ケミカル株式会社 水谷



# シリンジの樹脂焼けについて

HJJ4010-LT LT オール P シリンジ 1ML 滅菌済

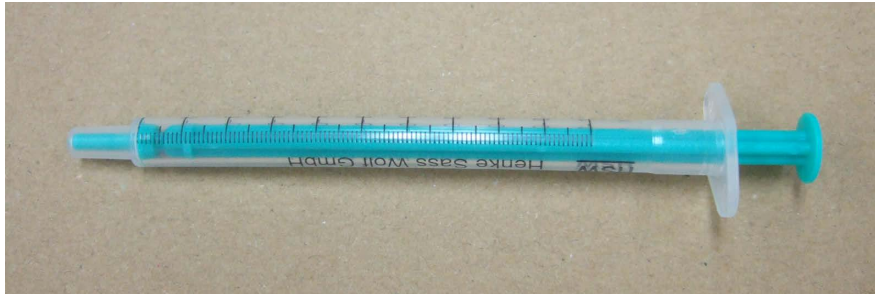

---

## シリンジの樹脂焼けの例

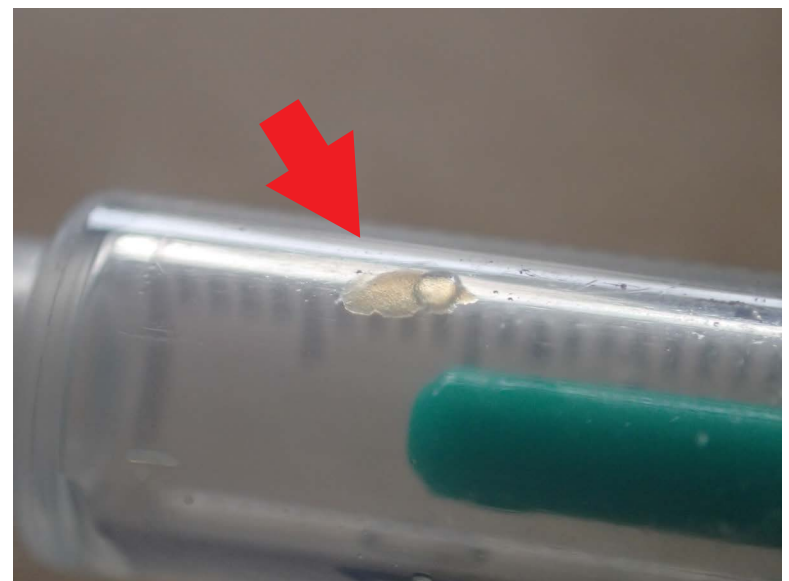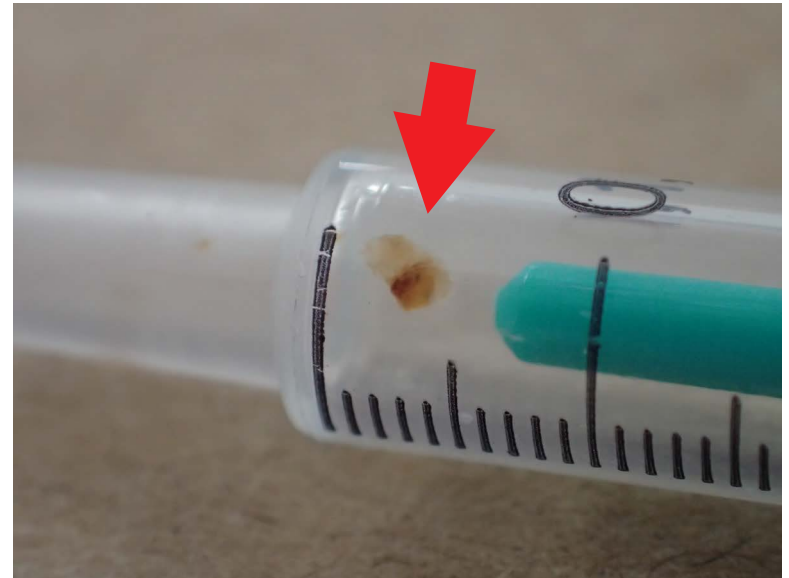

## シリンジの樹脂焼けの例



シリンジの外筒（バレル）部に茶色や黒い焦げのような汚れが見られる事があります。これはプラスチック製品の射出成形時に金型内の空気や樹脂から発生するガスが圧縮されて高温化し、成形品が焦げ付く現象です。この樹脂焼けは外観不良の一つで、製品の安全性には問題はありませんが、**このような製品を確認した場合は、念の為使用せずに廃棄して下さい。**