

Thermo Scientific Autosampler Vials

La-Pha-Pack SureStop Vials

新発売


ラファパック シュアストップ バイアル

サーモサイエンティフィック グループの共同開発より生まれた革新的なオートサンプラーバイアル キャッピングシステムです。それはキャップの締めすぎを防止するフランジ付のバイアルとセプタム脱落防止設計のAVCS(Advanced Vial Closure System)キャップを使用することにより

- 使用者によるキャッピングのばらつきを防ぎ、安定したトルクがかかるので一貫したシール効果があります。
- バイアルの開口部に最適なセプタムへの圧力がかかります。
- キャップをした状態のバイアルの高さが一定になる為、オートサンプラーからの認識、ハンドリング、互換性が向上します。


シュアストップ バイアルの構造

- バイアルのネジ下部にストップフランジが付いています。キャップの締めすぎを防止します。
- バイアルの底はフラットでマイクロインサート バイアルをほぼ垂直に保持します。
- 最高品質のガラスで製造しています。(Clear Glass: Type 1, Class A, 33 expansion glass)
(Amber glass: Type 1, Class B N-51 A glass)

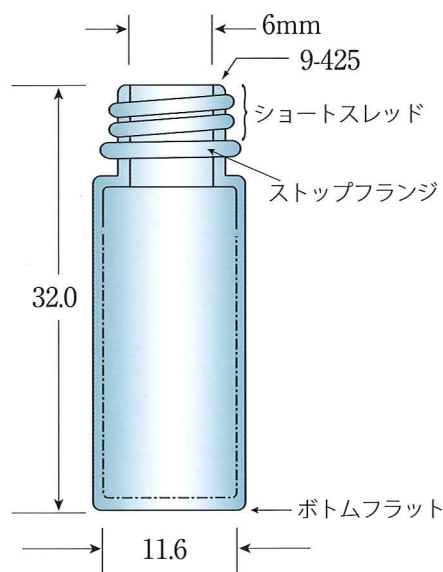

ショートスレッド キャップの構造

- 1、ニードルガイドリム
- 2、セプタム脱落防止シーリングデザイン
- 3、セプタム
- 4、9mmショートスレッド
- 5、SureStopフランジ

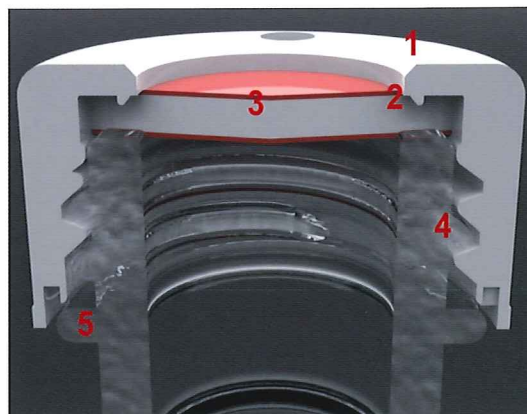

SureStopバイアルの特徴と利点

- ストップフランジの付いたSureStopバイアルはキャップの締めすぎが起こりません。
- 従来のバイアルではキャップを締めすぎた場合、セプタムはバイアルの内側に向かって滑ってしまいます。この状態でニードルが当たるとセプタムが脱落する恐れがあります。
- AVCSキャップを採用したSureStopバイアルシステムではこのセプタム脱落の心配がありません。
- SureStopバイアルはキャップの締めすぎを防ぎ、一定のトルクがセプタムにかかる為、バイアル内の気密性を高める設計になっています。



SureStopバイアル



11092746 11092747 11092748

コード	品名/仕様	入り数	価格
11092746	9-425 SureStop バイアル透明	100	¥2,400
11092746X		1000	¥21,600
11092747	9-425 SureStop バイアル透明ラベル付き	100	¥2,600
11092747X		1000	¥23,400
11092748	9-425 SureStop バイアル褐色ラベル付き	100	¥2,800
11092748X		1000	¥25,200

ショートスレッド キャップ



09150867

09150838




09150869

09152857

コード	品名/仕様	入り数	価格
09150867	9-425 ショートスレッド AVCS 青キャップ	100	¥2,500
09150867X	ナチュラル ラバー / 透明 TEF 1.0mm 厚	1000	¥22,500
09150838	9-425 ショートスレッド AVCS 青キャップ	100	¥3,500
09150838X	白シリコン / 赤 PTFE 1.0mm 厚	1000	¥31,500
09150869	9-425 ショートスレッド AVCS 青キャップ	100	¥5,700
09150869X	スリット入り 青 PTFE / 白シリコン 1.0mm 厚	1000	¥51,300
09152857	9-425 ショートスレッド 青キャップ	100	¥3,200
09152857X	スリット入り 赤 PTFE / 白シリコン 1.0mm 厚	1000	¥27,200

09152857 は従来のショートスレッド キャップです。AVCS 仕様ではありません。

マイクロインサート

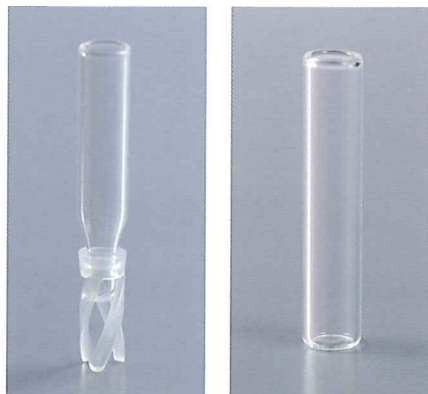

06090865

06090866

コード	品名/仕様	入り数	価格
06090865	100ul ポリスプリング マイクロインサート	100	¥9,600
06090865X		1000	¥86,400
06090866	300ul マイクロインサート (平底)	100	¥2,600
06090866X		1000	¥23,400

お問い合わせ



輸入発売元

大阪ケミカル株式会社

〒530-0045

大阪市北区天神西町5番17号 アクティ南森町2F

TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070

E-mail: info@daichem.co.jp

http://www.daichem.co.jp