

Membrane-Solutions

Syringe Filter

MS® シリンジフィルターは単に良質だけでなくしっかりとパッケージングされ、競合他社をしっかりと研究し価格に反映させました。また、既存のナイロン、PTFE、PES、MCE と PVDF フィルターはバージンポリプロピレン製ハウジングで 13mm、25mm と 30mm の 3 レンジを提供しております。我々は品質に対して重きを置いておりますが、魅力的な価格設定にも自信があります。

メンブレン材は業界でも最高のものを使用し承認されたクリーンルームで、高品質な製品を安定して確保するために、最新の製造技術を用いた工場が ISO9000 によって認められました。

ハウジングは INLET がルアーロック、OUTLET がルアースリップとなっております。

MS® シリンジフィルターには、すべて品質証明書が添付されています。





MS® ナイロンシリンジフィルター

- ◆親水性・有機溶媒・水溶液両用
- ◆半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
- ◆多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
NY013022	13	0.22	100	¥ 6,500
NY013045		0.45		¥ 6,500
NY025022	25	0.22		¥ 8,200
NY025045		0.45		¥ 8,200
NY025080		0.80		¥10,800
NY025500		5.00		¥10,800
NY030022	30	0.22		¥10,800
NY030045		0.45		¥10,800

MS®PVDF シリンジフィルター

- ◆疎水性
- ◆タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。
- ◆ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過等に適しています。
- ◆オートクレーブ滅菌可

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
PVDF013022	13	0.22	100	¥ 8,200
PVDF013045		0.45		¥ 8,200
PVDF025022	25	0.22		¥ 9,700
PVDF025045		0.45		¥ 9,700
PVDF030022	30	0.22		¥11,900
PVDF030045		0.45		¥11,900

MS®PTFE シリンジフィルター (疎水性)

- ◆疎水性
- ◆有機溶媒や酸・アルカリ等、幅広い有機溶媒に対して耐性を有する。
- ◆Non-Pyrogenic、DNA-free
- ◆強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
- ◆オートクレーブ滅菌可

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
PTFE013022	13	0.22	100	¥ 7,600
PTFE013045		0.45		¥ 7,600
PTFE013100		1.00		¥11,400
PTFE013500		5.00		¥11,400
PTFE025022	25	0.22		¥ 9,700
PTFE025045		0.45		¥ 9,700
PTFE025100		1.00		¥12,600
PTFE025500		5.00		¥12,600
PTFE030022	30	0.22		¥11,900
PTFE030045		0.45		¥11,900

MS®PTFE シリンジフィルター (親水性)

- ◆親水性
- ◆酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。
- ◆HPLC サンプル溶液の前処理に適しています。
- ◆オートクレーブ滅菌可

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
PTFE013022L	13	0.22	100	¥11,000
PTFE013045L		0.45		¥11,000
PTFE025022L	25	0.22		¥13,800
PTFE025045L		0.45		¥13,800
PTFE030022L	30	0.22		¥16,200
PTFE030045L		0.45		¥16,200

FILTER&SYRINGE Products Catalog

Syringe Filter

MS®MCE シリンジフィルター

- ◆親水性、混合セルロースエステル
- ◆耐薬品性、耐熱性に優れたフィルターで、高いスループットを実現。
- ◆ガス・油・アルコールなどの微粒子やバクテリアのろ過などに適しています。

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
MCE013022	13	0.22	100	¥ 7,500
MCE013045		0.45		¥ 7,500
MCE025022	25	0.22		¥ 9,000
MCE025045		0.45		¥ 9,000
MCE025300		3.00		¥12,600

MS® ポリプロピレンシリンジフィルター

- ◆疎水性(水溶液のろ過も可能)
- ◆タンパク質の吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
- ◆HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過に適しています。
- ◆Refractometry、UV-VIS測定

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
PP013022	13	0.22	100	¥8,200
PP013045		0.45		¥8,200
PP025022	25	0.22		¥9,700
PP025045		0.45		¥9,700

MS®CA シリンジフィルター

- ◆親水性
- ◆タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。
- ◆硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
CA013022	13	0.22	100	¥ 8,200
CA013045		0.45		¥ 8,200
CA025022	25	0.22		¥ 9,700
CA025045		0.45		¥ 9,700
CA025500		5.00		¥12,600
CA030022	30	0.22		¥11,900
CA030045		0.45		¥11,900

MS®CA シリンジフィルター (γ滅菌済)

- ◆親水性
- ◆タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。
- ◆硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。
- ◆γ滅菌済

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
CA013022S	13	0.22	100	¥13,800
CA013045S		0.45		¥13,800
CA025022S	25	0.22		¥15,000
CA025045S		0.45		¥15,000

MS®GF シリンジフィルター

- ◆水溶液・有機溶媒両用
- ◆有機溶媒・高汚染の液体・強酸に対して優れた耐性を示します。
- ◆粘性血清などの前処理、汚染度の高い液体のろ過などに適しています。

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
GF013070	13	0.70	100	¥8,200
GF013100	13	1.00		¥8,200
GF025070	25	0.70		¥9,700
GF025100	25	1.00		¥9,700



MS®PES シリンジフィルター

- ◆親水性
- ◆高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。
- ◆Non-pyrogenic、DNA-free
- ◆クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
- ◆オートクレーブ滅菌可


商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
PES013010	13	0.10	100	¥11,400
PES013022		0.22		¥ 8,200
PES013045		0.45		¥ 8,200
PES025010	25	0.10		¥12,600
PES025022		0.22		¥ 9,700
PES025045		0.45		¥ 9,700
PES030022	30	0.22		¥11,900
PES030045		0.45		¥11,900

MS®PES シリンジフィルター (γ 滅菌済)

- ◆親水性
- ◆高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。
- ◆Non-pyrogenic、DNA-free
- ◆クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
- ◆γ 滅菌済

商品コード	サイズ (mm)	孔径 (μm)	入数	定価
PES013022S	13	0.22	100	¥13,800
PES013045S		0.45		¥13,800
PES025022S	25	0.22		¥15,000
PES025045S		0.45		¥15,000

【 Simplepure 系列の構造図 】

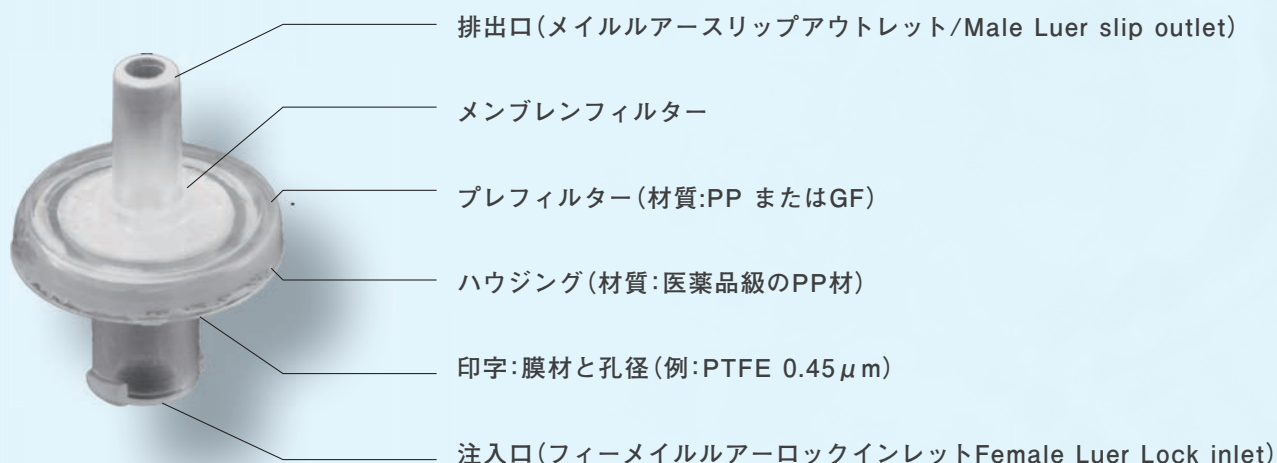

サンプル品請求用紙

サンプル品の送付を FAX でご依頼される方は、
必要事項を記入欄にご明記頂き、下記 FAX 番号までお送りください。
また下記 URL または QR よりご請求も可能です。
いずれの場合も必ず商品コード・送付先ご住所を忘れずご記入くださいませ。

FAX : **06-6311-1070**

<https://www.daichem.co.jp/info/sample3.html>



▼ユーザー記入欄

フリガナ			
御氏名			
会社名		所属部課	
会社住所	〒 - 都・道・府・県 市・区・郡		
	☐ この住所がサンプルの送付先である場合、✓を入れてください。		
電話番号			

▼代理店記入欄 ※代理店直接記入の場合、必ず、ユーザー名・担当者名をご記入ください。

代理店名		担当者	
電話番号		FAX 番号	

▼御希望サンプル(一品3個まで) ※オールプラスチックディスポシリンジにつきましては、各1個ずつまでとなります。

ご使用機種名	商品コード	品名と仕様	希望個数

▼送付先住所 ※代理店への送付を希望される場合のみ、ご記入ください。

〒 -

輸入販売元



医・理化総合輸入商社
大阪ケミカル株式会社
〒 530-0045 大阪市北区天神西町 5-17 アクティ南森町 2F
TEL:06-6311-1050 FAX:06-6311-1070
E-mail:info@daichem.co.jp

販売代理店

このカタログの記載内容は2025年6月現在のものです。