

Wonder Crush / Mill

ワンダー クラッシュ/ミル WDL-1



試 料



結晶ガラス

石英

デ ー タ

WDL-1 粉碎実験データ

試 料	結晶ガラス	石英 (水晶)
処 理 量	300g	300g
処 理 時 間	20秒	20秒
粉 碎 状 況	粉末状	粉末状

ワンダー クラッシュ / ミル WDL-1

特 徴


ワンダーブレンダーWB-1の大容量型で粉碎能力は同等ですが粉碎槽が大きいので投入試料サイズが2cm角の固形物の投入が可能です。粉碎を効率良くするためV字カッター刃の上にミル刃をセットした4枚刃になっています。大容量の試料を処理する為、1000Wのモーターを備えています。一度に大量の試料を処理する時に便利な機種です。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製を採用しています。

※ このWDL-1には微粉碎フタは付いていません。

仕 様

型 式	WDL-1
電 源	AC100V、50/60Hz
電 気 容 量	1000W
回 転 数	25,000rpm
寸 法	162φ×298mm (H)
重 量	4.6kg
容 量	200mL
付 属 品	クリーナーブラシ
価 格	¥124,000

WDL-1用交換部品

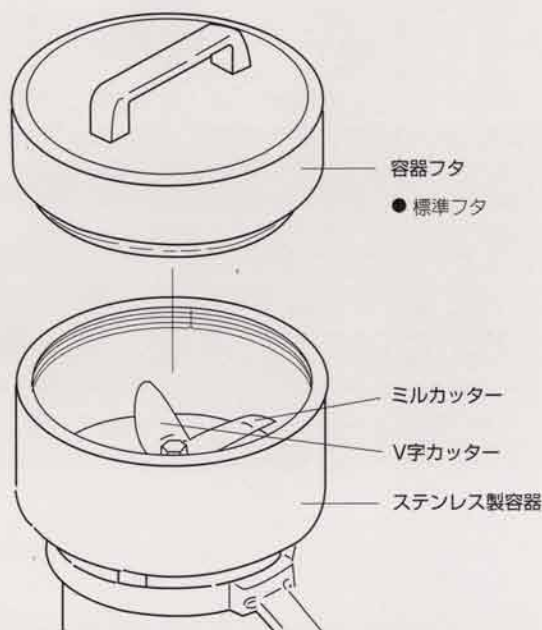

型 番	品 名	価 格
PN-W11	SUS容器	¥25,000
PN-W12	標準フタ	¥25,000
PN-W13	ミルカッター	¥4,500
PN-W14	V字カッター	¥4,500
PN-W15	フェルトOリング	¥1,000